

TERRAILLON

PESE PERSONNE

POP COLOR COACH

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com

Terrailon SAS France & Headquarters
1, rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine - France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Service Après Vente
SAV TERRAILLON chez GEFCO
ZA La Porte des Champs
Bâtiment A
95470 SURVILLIERS

Terrailon UK Ltd
2 The Waterhouse
Waterhouse Street - Hemel Hempstead
Herts HP1 1ES - UK
Tel: +44 (0)1442 270444 - sales@terraillon.co.uk

Terrailon Asia Pacific Ltd
4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel: + 852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terrailon Corp USA
contact@terraillon.fr

Terrailon®
www.terraillon.com



NOTICE / INSTRUCTION MANUAL

COLOR COACH



Terrailon®

www.terrailon.com

A LIRE AVANT UTILISATION

- Ne pas démonter la balance; une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel en milieu médical ; il est destiné exclusivement à un usage privé.
- Nettoyer avec un chiffon humide, en s'assurant que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne pas utiliser de solvants, ni immerger l'appareil dans l'eau.
- Eviter les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
- Une fois l'écran éteint, attendre 10 secondes avant de remonter (réitérer cette opération entre chaque pesée).

UTILISATION DU PRODUIT

Initialisation

- Insérer les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités. Oter les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- **La balance doit être initialisée lors de la première utilisation, chaque fois qu'elle est déplacée ou après remplacement des piles.** Placer la balance sur une surface dure et plane. Appuyer brièvement et fermement avec votre pied au milieu du plateau. L'écran montre 00000, puis la balance s'éteint automatiquement. Votre balance est maintenant prête à être utilisée.
- Si votre balance dispose de plusieurs unités de mesures, vous avez la possibilité de changer les unités de mesures (KG/ST/LB) par une simple pression sur le bouton qui se trouve à l'arrière de la balance.

PESAGE UNIQUEMENT

1. Montez sur le pèse-personne et restez immobile pendant le calcul du poids.
2. L'écran affiche votre poids
3. Le pèse-personne s'éteint automatiquement après utilisation.
Attendez au moins 10 secondes avant de vous reposer.


SUIVI DE L'EVOLUTION DE VOTRE POIDS

Ce modèle est doté de 4 touches numérotées de 1 à 4. Chacune des 4 touches est réservée à un membre de la famille qui peut ainsi suivre

ses écarts de poids entre deux pesées.

Lorsque vous vous pesez en utilisant une des touches, votre poids est mémorisé automatiquement.

1. Appuyez sur votre touche personnelle (exemple : mémoire 1). Le numéro sélectionné s'affiche.
2. Montez sur le plateau et restez immobile jusqu'à ce que votre poids s'affiche.
3. L'écran affiche en alternance votre poids et la différence de poids avec la dernière pesée. La couleur vous indique la tendance.

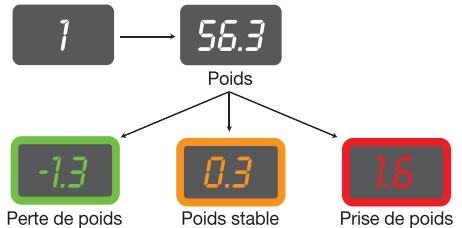

Votre poids est mémorisé automatiquement.

Identification automatique de l'utilisateur

Si l'utilisateur monte directement sur le pèse-personne, l'appareil s'allume et indique son poids.

S'il parvient à identifier l'utilisateur, les mesures s'affichent. S'il détecte plusieurs poids similaires, il affiche les différents numéros d'utilisateurs correspondants.

Sélectionnez alors votre numéro d'utilisateur à l'aide des touches. Une fois que vous avez choisi l'utilisateur, les mesures s'affichent puis l'appareil s'éteint. Si vous ne choisissez pas d'utilisateur, les numéros d'utilisateur s'affichent quelques secondes puis l'appareil s'éteint.

Si une erreur se produit ou si l'utilisateur ne peut être identifié, le poids actuel s'affiche et l'appareil s'éteint.

Affichages spéciaux

Err0	Initialisation incorrecte - réinitialisation nécessaire
Err1	Poids instable, recommencer le pesage
Err2	Surcharge, Retirer le poids immédiatement
bAtt	Remplacer la batterie

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Déposer les piles usagées dans un container prévu à cet effet pour qu'elles soient collectées et recyclées.

Ne pas mélanger différents types de piles, ni les piles usagées avec les piles neuves.



En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant la période de garantie, de tels défauts seront réparés gratuitement (la preuve d'achat devra être présentée en cas de réclamation sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, de mauvaise utilisation ou de négligence. En cas de réclamation, contacter en premier lieu le magasin où vous avez effectué votre achat.